

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- 1. El sistema infusor debe ser llenado de acuerdo con el procedimiento descrito en las indicaciones de llenado y preparación.
- 2. Las dosis de medicamentos inadecuadas pueden resultar en daño al paciente incluyendo intoxicación por medicamentos.
- 3. El uso inadecuado del dispositivo puede resultar en daño al paciente, incluyendo intoxicación por medicamentos.
- 4. Evalúe al paciente previo al uso, para asegurar que el paciente es apropiado para el dispositivo.
- 5. De un solo uso. No rellenar ni esterilizar. El reuso o reproceso de un dispositivo de un solo puede resultar en la contaminación y comprometer el funcionamiento del dispositivo.
- 6. No llene con menos del volumen mínimo o más del volumen máximo.
- 7. No use, si la envoltura protectora estéril o la capa del protector Luer no están en su lugar.
- 8. El recorrido del fluido es estéril. No coloque el dispositivo en un campo estéril.
- 9. No use si el empaque ha sido abierto o está dañado.

Para más información sobre el portafolio de infusores, por favor lea las instrucciones de uso.

REFERENCIAS: **1.** Zahnd D., Aebi S., Rusterholz S, Fey MF, Borner MM. A randomizer crossover trial assessing patient preference for two different types of portable infusion-pump devices. *Ann Oncol.* 1999;10[6]:727-729. **2.** Koeppen, MA and Caspers, SM. Problems identified with home infusion pumps. *J Intravenous Nursing.* 1994;17[3]: 151-156. **3.** Magid DM, Vokes EE, Schilsky RL, et al. A randomized study of inpatient versus outpatient continuous intravenous infusion chemotherapy: psychosocial aspects. *Selective Cancer Therapeutics.* 1989; 5[3]: 137-45. **4.** Matthews PC, Conlon CP, Berendt AR, et al. Outpatient parenteral antimicrobial therapy (OPAT): Is it safe for selected patients to self-administer at home? A retrospective analysis of a large cohort over 12 years. *J Antimicrob Chemother.* 2007;60[2]:356-362. **5.** Broadhurst D. Transition to an Elastomeric Infusion Pump in Home Care. *Journal of Infusion Nursing.* 2012;35[3]:143-151. **6.** Seaton RA and Barr DA. Outpatient parenteral antibiotic therapy: principles and practice. *Eur J Intern Med.* 2013;24[7]:617-623. **7.** Bernard L. Outpatient parenteral antimicrobial therapy (OPAT) for the treatment of osteomyelitis: evaluation of efficacy, tolerance and cost. *J Clinical Pharmacy and Therapeutics* 2001; 26: 445-451. **8.** André T, Boni C, Mounedji-Boudiaf L, et al. Multicenter International Study of Oxaliplatin/5-Fluorouracil/Leucovorin in the Adjuvant Treatment of Colon Cancer (MOSAIC) Investigators Oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin as adjuvant treatment for colon cancer. *N Engl J Med.* 2004;350[23]: 2343-2351. **9.** Capedevila X, Macaire P, Akunin P, et al. Patient-controlled perineurial analgesia after ambulatory orthopedic surgery: a comparison of electronic versus elastomeric pumps. *Anesth Analg.* 2003;96:414-417. **10.** Chapman, AL., S. Dixon, D. Andrews, et al. (2009a). Clinical efficacy and cost-effectiveness of outpatient parenteral antibiotic therapy (OPAT): a UK perspective. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy.* 64[6] 1316-1324. **11.** Carro G, Lawton J, Harper A, et al. Evaluation of Elastomeric and Electronic Medication Pumps at an Outpatient Cancer Center. *J Oncol Pharm Practice.* 2010;16:14.

Baxter, S.A de C.V.
Av. de los 50 Metros No. 2,
CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

www.baxter.com.mx

Baxter, el Sistema de infusión Portátil Baxter y Repeater Pump son marcas comerciales de Baxter internacional Inc.

Sistema de Infusión Portátil Baxter
No. Reg. 1328C97 SSA

Repeater Pump
No. Reg. 2872E2013 SSA
No. de Entrada: 213300202C7867

Baxter



Infusor

SISTEMA DE INFUSIÓN PORTÁTIL BAXTER

Ofrecemos flexibilidad, libertad y confianza

UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE COMO SUS NECESIDADES

EL LÍDER DE LA CATEGORÍA Y SOCIO SANITARIO DE CONFIANZA

Baxter fue el pionero en los infusores, creando la modalidad hace casi 30 años. Y seguimos siendo líderes en esta categoría hasta el día de hoy, proporcionando opciones de tratamiento fiables que ayudan a fomentar el éxito de los pacientes en la terapia de infusión ambulatoria.



ATENCIÓN SENCILLA, SEGURA Y EFICAZ

El tratamiento convencional puede ser complejo de prescribir, administrar, utilizar y controlar. Los profesionales sanitarios buscan una opción sencilla para ofrecer una atención de calidad, sobre todo cuando están sometidos a la presión de las limitaciones de tiempo y el volumen de pacientes.

Los dispositivos de infusión son sencillos de administrar y utilizar: una opción de tratamiento de infusión de comprobada eficacia para terapias específicas que ayudan a los pacientes a volver rápidamente a una vida lo más normal posible.^{1, 2, 3}



SATISFACCIÓN EN EL PACIENTE

Menos movilidad. Menos libertad. Menos vida. Los pacientes que sienten que su enfermedad controla sus vidas pueden estar desanimados, a menudo insatisfechos y no cumplir plenamente, con el tratamiento. Esto hace que el tratamiento sea más difícil.^{1, 2, 3}

Los dispositivos de infusión ofrecen a los pacientes más opciones para elegir cómo y dónde moverse durante el día, con un tratamiento discreto que favorece la independencia y la satisfacción del paciente.¹



A través de todas las demandas diversas y diferentes retos diarios, los infusores elastoméricos Baxter resuelven.



Infusor SISTEMA DE INFUSIÓN PORTÁTIL BAXTER

RECURSOS OPTIMIZADOS

La rentabilidad de la asistencia hospitalaria de calidad está sometida a una presión cada vez mayor. La asignación de recursos limitados, como las camas, el tiempo de las enfermeras y los equipos de capital, es un reto constante.

Los dispositivos de infusión le ofrecen una opción clínicamente eficaz y desechable para determinadas terapias, como la OPAT (Outpatient parenteral antimicrobial therapy). Esta terapia puede ayudar a optimizar los escasos recursos clínicos y agilizar la eficiencia operativa.⁶

VALOR COMPROBADO

Un presupuesto es un presupuesto. Hay un tope. Y luego hay que buscar un poco más.

Los dispositivos de infusión elastoméricos le ayudan a obtener más valor de sus gastos en atención médica. Ofrecen una opción de administración de terapia intravenosa que ahorra gastos de inventario iniciales, como baterías, equipos de administración y materiales de limpieza, elimina los costes de mantenimiento continuo del dispositivo que se requieren con las bombas electrónicas.¹¹

UNA SOLUCIÓN COMPROBABLE

Utilizando una sencilla tecnología elastomérica, los dispositivos de infusión no electrónicos agilizan la administración continua de diversos medicamentos directamente a los pacientes mediante la terapia de infusión ambulatoria.

Utilizados en entornos hospitalarios y no hospitalarios, los infusores son una alternativa probada para el tratamiento de pacientes hospitalizados en la que los proveedores de atención médica pueden confiar.

Preparación sencilla.

Mínima intervención clínica y de dispositivos.

Menor tiempo de monitorización de los pacientes en comparación con las bombas electromecánicas.⁵

Mayor preferencia y satisfacción del paciente en comparación con las bombas electromecánicas.¹





ADMINISTRACIÓN SENCILLA DE LOS MEDICAMENTOS

Fáciles de llenar y utilizar, los dispositivos desechables de infusión cuentan con tecnología elastomérica [globo] para retener y administrar la medicación. Una vez llenado, la presión generada por el material elastomérico del depósito administra las infusiones de medicación a medida que el globo se contrae. Existe una correlación directa entre el volumen de llenado del dispositivo, el caudal y el tiempo de administración de la infusión.




COMPATIBILIDAD DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS

Al disponer de datos validados de estabilidad y compatibilidad, los dispositivos de infusión Baxter pueden llenarse con una variedad de fármacos para satisfacer diferentes necesidades terapéuticas, lo que ayuda a la toma de decisiones clínicas y garantiza la máxima seguridad del paciente.

Consulte www.stabforum.com para obtener más información sobre la estabilidad del infusor con los medicamentos.

Además de proporcionar una terapia segura y eficaz, los dispositivos elastoméricos ofrecen un diseño de producto sencillo que ahorra tiempo, dinero y recursos.^{5, 6, 10}

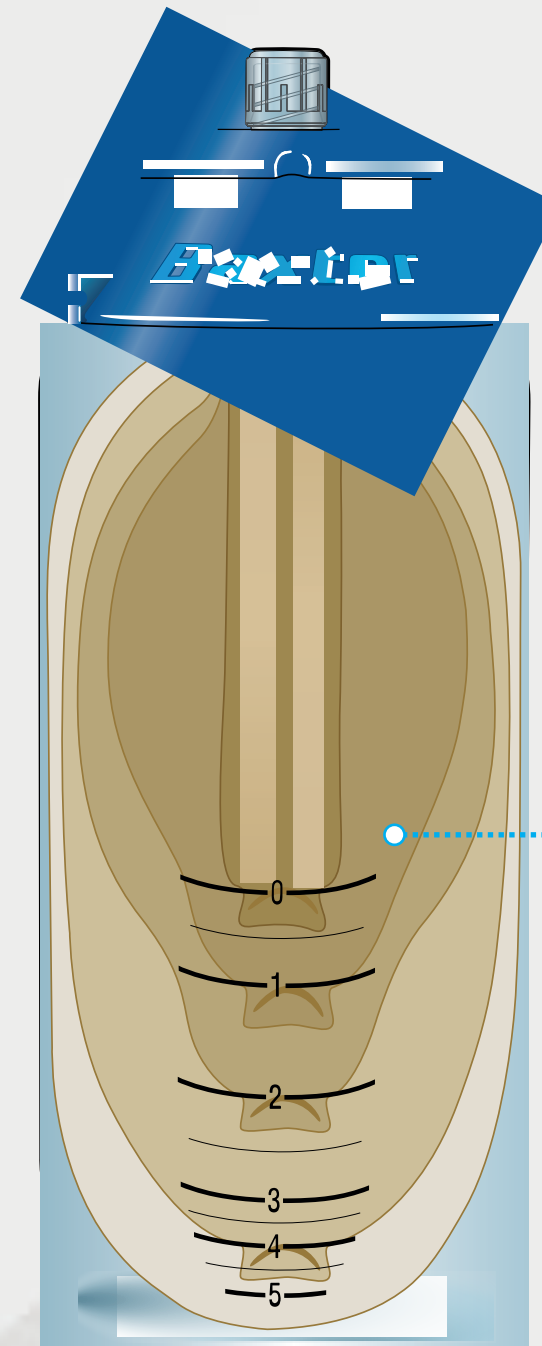

La ilustración representa un dispositivo elastomérico Infusor genérico.

El globo elastomérico se contrae gradualmente a lo largo de la infusión para suministrar la medicación al paciente.

OPCIONES DE LLENADO QUE SE ADAPTAN A SUS NECESIDADES

No importa cómo prefiera operar su farmacéutica, Baxter le apoya.



SIMPLE

LLENADO MANUAL

La presión media necesaria para llenar el dispositivo Infusor manualmente con una jeringa permite un llenado rápido.



EFFICIENT

LLENADO AUTOMATIZADO

Para las farmacéuticas que buscan mejorar la eficiencia, se puede utilizar para llenar un dispositivo Infusor en tan sólo 8 a 43 segundos con un volumen de llenado consistente y preciso.



CONSISTENT

PRE-LLENADO DE COMPUESTOS

Utilizando procesos asépticos bajo estrictas normas de calidad, un centro de composición de Baxter puede llenar y suministrar dispositivos infusor listos para usar.

Los pacientes prefirieron infusores Baxter.

Un estudio oncológico [n=10; p<0.01] realizado para evaluar la preferencia de los pacientes por dispositivos elastoméricos de infusión o las bombas mecánicas de control electrónico se interrumpieron mientras estaban en marcha, porque todos los pacientes preferían el Infusor.¹

PARA UNA SERIE DE NECESIDADES TERAPÉUTICAS

La cartera de productos de infusores ofrece una alternativa de administración terapéutica que favorece la ambulación temprana del paciente y un diseño de producto sencillo que favorece la provisión de cuidados.^{1, 4, 7}

Los infusores ayudan a los pacientes que necesitan tratamiento intravenoso para enfermedades agudas y crónicas.

Oncología.^{1, 8}

Terapia antimicrobiana parenteral ambulatoria [OPAT].⁷

Analgesia Regional.⁹

Tratamiento del dolor postoperatorio.

La terapia de infusión ambulatoria tiene disponible los dispositivos de infusión elastoméricos.

Estos proveen una terapia simple, efectiva, preferida por los paciente y en la que los médicos se sienten más confiados de prescribir.

Los estudios muestran que los pacientes prefieren utilizar dispositivos elastoméricos porque son ligeros, silenciosos, cómodos, discretos y minimizan las interferencias con las actividades diarias.^{1, 5}

Infusor SISTEMA DE INFUSIÓN



ES UN CAMBIO INTELIGENTE

CLÍNICAMENTE

Promueve un mayor cumplimiento del tratamiento al permitir que los pacientes reciban atención en la comodidad de su hogar.⁶

Libera tiempo para que los médicos se centren en la atención al paciente.⁵

Reduce el riesgo de infecciones hospitalarias.⁶

ECONÓMICAMENTE

Reduce los ingresos al proporcionar una terapia extra-hospitalaria eficaz.⁶

Acorta las estancias hospitalarias, como ha demostrado un estudio reciente que ha mostrado un ahorro de costes del 41% por los días de cama ahorrados.¹⁰

Reduce el uso de personal de enfermería y otros recursos hospitalarios al eliminar la necesidad de monitorización constante, programación de dispositivos y mantenimiento de equipos.⁵

✓ Apoya la tendencia sanitaria de trasladar el tratamiento a entornos no hospitalarios.

El portafolio de Baxter Infusor. Inspirando confianza. Aumentando la satisfacción del paciente. Apoyándole con alternativas probadas de terapia de infusión para garantizar la mejor atención posible a cada paciente.

OFRECIENDO MÁS ALLÁ DE UN DISPOSITIVO



UN DISEÑO PROBADO Y FIABLE

El rendimiento de los dispositivos de infusión Baxter ha superado la prueba del tiempo, ya que se ha demostrado que ofrecen una terapia de infusión ambulatoria fiable y eficaz, así como la seguridad del paciente, al tiempo que se han ganado la confianza de los profesionales sanitarios durante casi tres décadas.



DATOS DE ESTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD INIGUALABLES


Los datos exclusivos de infusión Baxter sobre la estabilidad y compatibilidad de más de 100 fármacos se obtienen a través de metodologías de prueba muy rigurosas, con todos los resultados totalmente verificados. Disponibles en un cómodo formato basado en la web, estos datos eliminan el riesgo de interacción incompatible entre el fármaco y el dispositivo para proporcionar a los médicos la confianza necesaria para prescribir los dispositivos de infusión.



ESTRICTA CALIDAD DE FABRICACIÓN

Utilizando el rigor de la ingeniería avanzada y las buenas prácticas de fabricación actuales [cGMP]*, los dispositivos de infusión se fabrican en los Estados Unidos de acuerdo con los más altos estándares internacionales para garantizar la consistencia y fiabilidad.

*cGMP: Current Good Manufacturing Practice

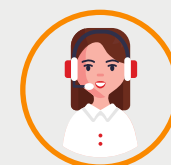

ATENCIÓN AL CLIENTE DEDICADA

El servicio de atención al cliente, la asistencia, la formación y la educación sobre el Sistema de Infusión Portátil Baxter son inigualables. Creemos en el fomento de una estrecha colaboración con usted para mejorar su capacidad de ofrecer una mejor atención al paciente a medida que la atención sanitaria y sus retos siguen evolucionando.